

A photograph of three women of different ethnicities embracing each other. The woman on the left is Black with braided hair, the woman in the middle is Asian with short dark hair, and the woman on the right is white with long blonde hair. They are all looking towards the camera with soft expressions. The woman on the right is wearing a gold ring.

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

ПОСІБНИК
ПО GESKE
2024

GESKE GERMAN BEAUTY TECH

Переосмисліть свою шкіру

До сьогодні більшість людей доглядали за своєю шкірою за допомогою кремів, сироваток і масок. Відомо, що найкращих і найбільш помітних результатів, особливо в очищенні пор, омолодженні та ліфтингу, можна досягти лише в косметичних салонах, дерматологічних кабінетах або клініках краси. Але скільки людей можуть собі це дозволити?

GESKE виводить догляд за шкірою на новий рівень!

Тепер найкращі процедури догляду за шкірою, такі як HydraFacial, мікронідлінг, LED-терапія та мікродермабразія можна зробити вдома за допомогою зручного косметологічного пристрою. Ціна пристрою в рази нижча за вартість процедур у салоні.

Пристрої GESKE, розроблені в співпраці з провідними німецькими дерматологами, виводять протокол догляду за шкірою на новий рівень. Використання б'юті-пристроїв разом із засобами для догляду поліпшує поглинання активних інгредієнтів, а передові технології пристроїв допомагають зупинити і зворотно вплинути на процеси старіння та негативний вплив довкілля.




Унікальна пропозиція

ДЕШЕВШЕ

до 90%, якщо порівняти зі схожими продуктами на ринку

*ціна

**пульсацій/хв

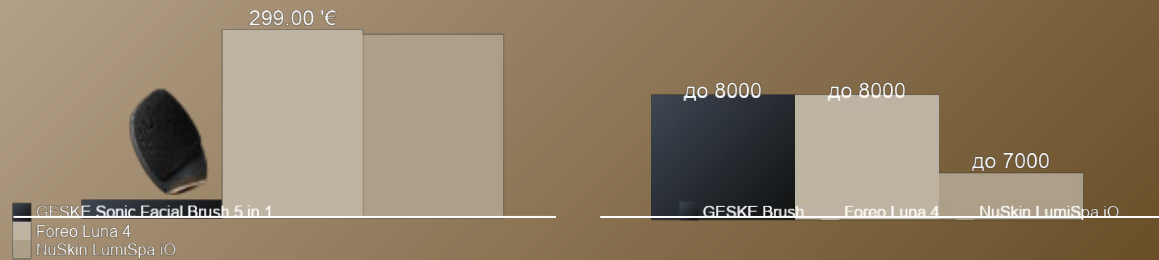

ДЕРМАТОЛОГІЧНО

та схвалено дерматологами



ПРИСТРОЇ

Доступні в 11 кольорах



НА ОСНОВІ ШІ

Застосунок GESKE, що сканує шкіру, персоналізовані плани для догляду та сеанси з інструкціями



НАЙБІЛЬШЕ НАГОРОД

Компанія Beauty Tech
100+ нагород



15-РІЧНА ГАРАНТІЯ



МИ — ЄДИНИЙ БРЕНД У СВІТІ,
ЩО ПРОПОНУЄ

SmartAppGuided™

Неймовірно широкий асортимент доглядальних пристроїв за найкращими цінами. GESKE є ідеальним вибором для всіх, хто прагне найкращих результатів для себе та власної шкіри.

*Роздрібні ціни взято з офіційних інтернет-магазинів конкурентів.

**Продукти конкурентів, що мають функції аналогічні до GESKE Sonic Facial Brush | 5 in 1.

ПОРТФОЛІО ПРОДУКТІВ



ТЕХНОЛОГІЇ КОСМЕТИЧНИХ САЛОНІВ

для домашнього використання



Full-Spectrum Power-LED
Light Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



MicroNeedling
Technology



Exfoliating Aqua-Stream
Technology



ПОРТФОЛІО Б'ЮТІ-ПРИСТРОЇВ

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

ОЧИЩЕННЯ	 Facial Brush 4 in 1  Facial Brush 4 in 1  Sonic Facial Brush 5 in 1  Sonic Thermo Facial Brush 6 in 1  Sonic Thermo Facial Brush & Face Lifter 8 in 1  MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover 9 in 1  Aqua-Stream Face Cleanser 8 in 1  MicroDermabrasion Blackhead Remover 7 in 1  Body Brush 4 in 1  Body Brush 4 in 1  Sonic Body Brush & Intensive Exfoliator 7 in 1  Sonic Full-Body Brush & Intensive Exfoliator 8 in 1  Sonic LED Full-Body Brush & Intensive Exfoliator 9 in 1 ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ПОР ОЧИЩЕННЯ ТІЛА
МАСКИ	 Sonic Warm & Cool Mask 9 in 1  Touchless Magnetic Peeling Mask 5 in 1
ЗВОЛОЖЕННЯ	 Facial Hydration Refresher 4 in 1  Facial Hydration Refresher 4 in 1
АНТИВІКОВІ	 MicroNeedle Face & Body Roller 8 in 1  MicroNeedle Face & Body Roller 9 in 1  MicroNeedle Face Roller 9 in 1 ПРОФІЛАКТИКА ЗМОРЩОК  MicroCurrent Face-Lift Pen 6 in 1  MicroCurrent Face-Lifter 6 in 1  Skin Firming Wand 7 in 1  Skin Firming Wand 7 in 1 ЛІФТИНГ  Sonic Facial Roller 4 in 1  Sonic Facial & Body Roller 4 in 1 КОНТУРУВАННЯ
ЛІМФОМАСАЖ ТА УСУНЕННЯ НАБРЯКІВ	 Cool & Warm Face and Body Massager 7 in 1  Sonic Cool & Warm Face and Body Massager 9 in 1  Cool & Warm Eye and Face Massager 7 in 1  Cool & Warm Eye Massager 7 in 1  Cool & Warm Duo Eye Massager 7 in 1
ОЧІ ТА ГУБИ	 Warm & Cool Eye Energizer 6 in 1  Lip Volumizer & Booster 4 in 1  Lip Volumizer & Booster 4 in 1  Lip Volumizer & Booster 6 in 1 ОЧІ ГУБИ
ВОЛОССЯ	 Precision Trimmer 4 in 1

ОЧИЩЕННЯ



Hello Kitty
Facial Brush | 3 in 1



Hello Kitty
Facial Brush | 3 in 1



Hello Kitty
Facial Brush | 3 in 1



Hello Kitty
Facial Brush | 4 in 1



Hello Kitty
Sonic Facial Brush | 4 in 1



Hello Kitty
Sonic Thermo Facial Brush | 5 in 1



Hello Kitty
MicroCurrent Skin Scrubber &
Blackhead Remover | 9 in 1

ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ПОР

МАСКИ



Hello Kitty
Sonic Warm & Cool Mask | 8 in 1



Hello Kitty
Sonic Warm & Cool Mask | 8 in 1

ЗВОЛОЖЕННЯ



Hello Kitty
Facial Hydration Refresher | 4 in 1

АНТИВІКОВІ



Hello Kitty
MicroCurrent inFace-Lift Pen | 6 in 1

ЛІФТИНГ

ОЧІ



Hello Kitty
Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1

ОЧІ

ОЧИЩЕННЯ



Очищий лосьон



Засіб для очищення обличчя



Зволожувальний очищий засіб



Очищий пілінг

МАСКИ



Магнітна очисна маска



Очистна маска



Детоксикаційна денна маска



Денна маска денна маска



Ультразволожувальна маска



Освіжальна та відновлювальна маска



Енергетична денна маска



Відлущувальна денна маска



Денний гель-маска денна маска



Заспокійлива та розслаблювальна маска



Омолоджувальна маска



Омолоджувальна маска з вітамінами



Омолоджувальна нічна маска



Відновлювальна та регенерувальна нічна маска

ОЧИЩЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

АНТИВІКОВІ

СИРОВАТКИ
І ГЕЛІ



Зволожувальна сироватка



Сироватка з гіалуроновою кислотою



Сироватка для захисту



Сироватка для розгладження шкіри



Зволожувальний гель MicroCurrent

ЗВОЛОЖЕННЯ

АНТИВІКОВІ

МІКРОСТРУМИ

КРЕМИ



Зволожувальний денний крем



Нічний крем денний крем



Денний крем із захистом від УФ-випромінювання



Відновлювальний нічний крем



Нічний крем проти старіння

ДЕННІ

НІЧНІ

ОЧІ



Сироватка проти набряків навколо очей

МАСКИ



ВАЖЛИВО

Зображення на масці вказує на потрібний пристрій.
Враховуйте, що для кожного пристрою Sonic Mask потрібен свій розмір серветки. Щоб уникнути проблем, переконайтеся, що ви правильно підбираєте маску до пристрою.



ПРОДУКТИ GESKE ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ



Facial Brush | 4 in 1

Силіконова щітка для обличчя

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Eye-Nose Area Targeted Design



Lip Volumizer & Booster | 4 in 1

Збільшувач об'єму для пухкіших губ

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Natural Lip Color Revitalizing

 Targeted Instant Lip Volumizing

 Ultra-Volume Technology



Body Brush | 4 in 1

Силіконова щітка для тіла

 Ergonomic Targeted Design

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Smoothing Skin Massage



Body Brush | 4 in 1

Силіконова щітка для тіла


 Ergonomic Targeted Design

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Smoothing Skin Massage

Доступні кольори:

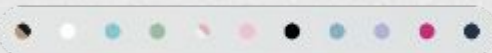

ПРОДУКТИ HELLO KITTY ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ



Facial Brush | 3 in 1

Силіконова щіточка для обличчя

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

Доступні кольори:  



Facial Brush | 3 in 1

Силіконова щіточка для обличчя

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

Доступні кольори:  



Facial Brush | 3 in 1

Силіконова щіточка для обличчя


 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Super Soft & Flexible Silicone Tips

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

Доступний колір: 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ

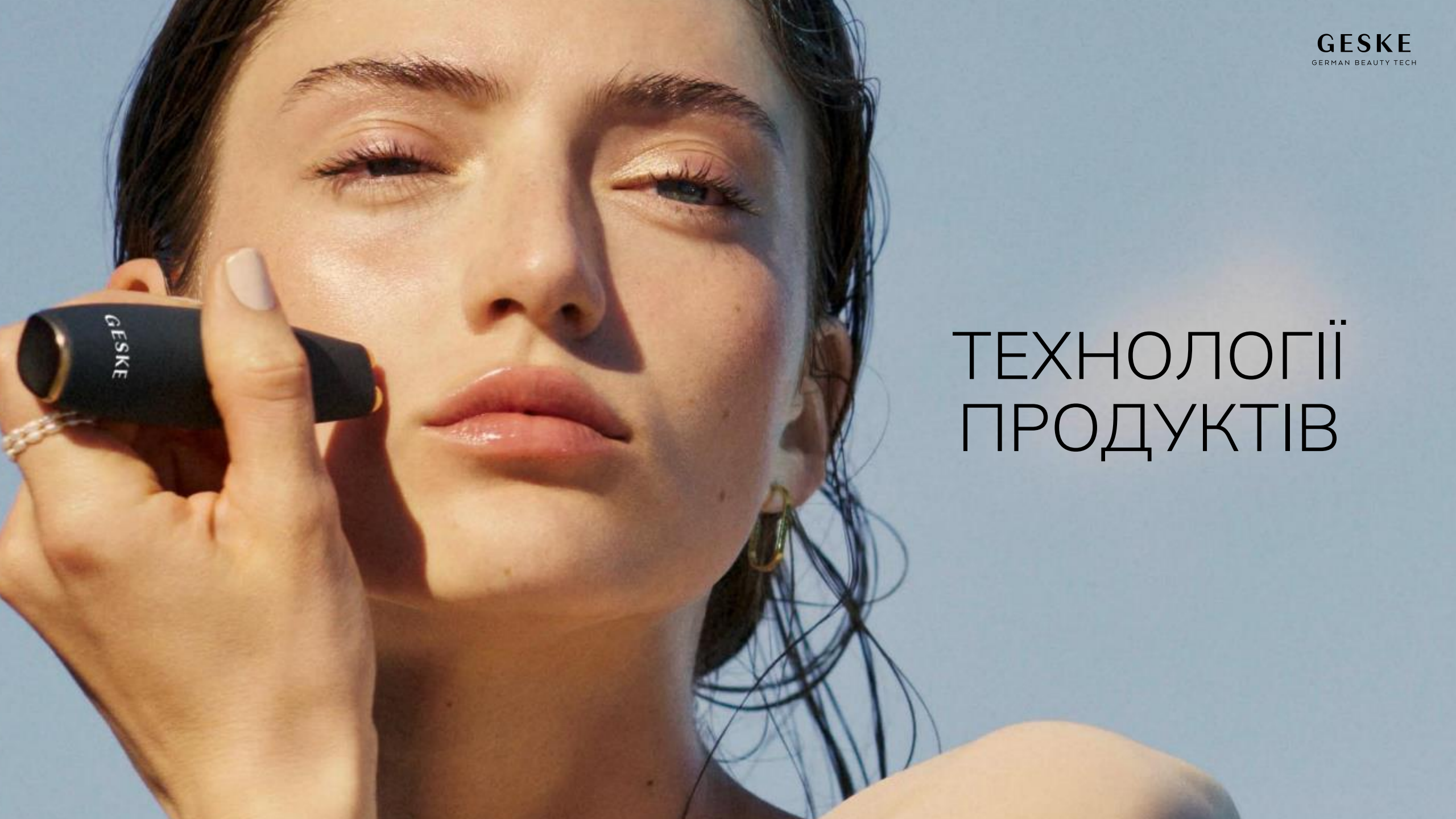

ТЕХНОЛОГІЯ SMARTSONIC PULSATION

МАСАЖНА ТЕХНОЛОГІЯ

Як працює технологія SmartSonic Pulsation?

Генерація звукових хвиль:

- Пристрій має мотор, який генерує звукові хвилі.
- Ці звукові хвилі працюють на частотах, що перевищують межу людського слуху, звідси й назва «звукові».

Передача вібрацій:


- Звукові хвилі створюють швидкі коливання або вібрації в головці щітки або аплікаторі пристрою.
- Головки зі щіткою пристроїв для догляду за шкірою зазвичай виготовлено з м'якої силіконової щетини.

Ефект мікромасажу:

- Вібраційна головка зі щіткою створює ефект мікромасажу.
- Допомогає розчиняти та видаляти бруд, жир, мертві клітини та макіяж із поверхні шкіри та пор.

Що таке технологія SmartSonic Pulsation?

- Звукові частоти
- Швидкі, пульсаційні рухи
- Створює мікровібрації на шкірі

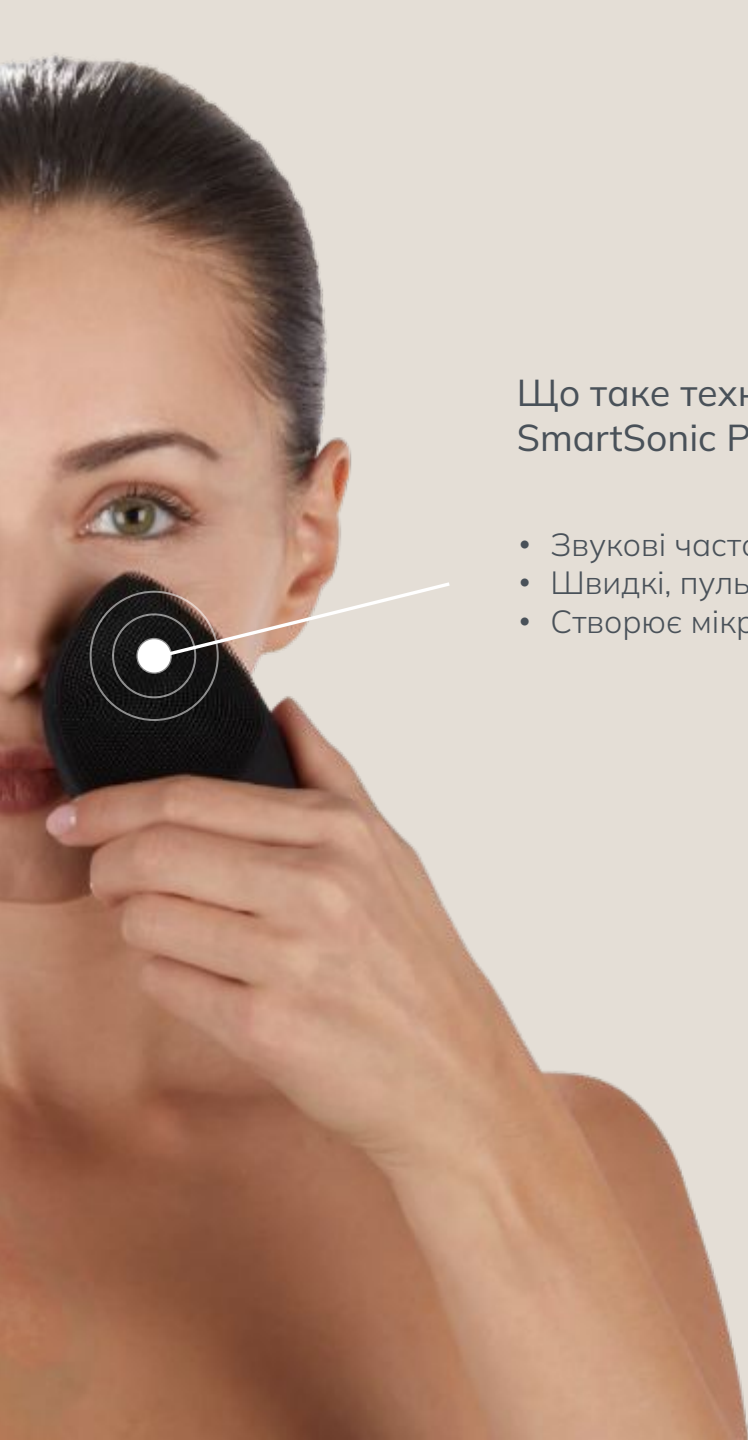

ТЕХНОЛОГІЯ SMARTSONIC PULSATION

КОРИСТЬ

Ультрагігієнічне глибоке очищення

- Очищає шкіру, видаляючи бруд, жир і забруднення значно ефективніше, ніж вручну.

Відлущування

- Сприяє делікатному видаленню мертвих клітин шкіри.
- Забезпечує рівномірний тон шкіри.

Очищення пор

- Може сприяти звуженню на вигляд порам.
- Робить текстуру шкіри гладшою і досконалішою.

Поліпшення кровообігу

- Може поліпшити кровообіг.
- Сприяє здоровому вигляду шкіри.

Розслаблення і масаж

- Надає масажний ефект.
- Сприяє розслабленню.
- Зменшує напруження м'язів обличчя.

Стимуляція колагену

- Може стимулювати вироблення колагену, що є важливим для підтримання еластичності шкіри.

Підходить для всіх типів шкіри

- Регульовані пульсації SmartSonic під чутливість шкіри та її потреби.



ПРИСТРОЇ З ТЕХНОЛОГІЄЮ SMARTSONIC PULSATION



Очищення

Sonic Facial Brush | 5 in 1

Силіконова вібраційна щіточка для обличчя

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Flexible Eye-Nose Area Targeted Design
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage



Очищення
Розкриття пор

Sonic Thermo Facial Brush | 6 in 1

Вібраційна щіточка для обличчя з технологією зігрівання

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Eye-Nose Area Targeted Design
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage
- Pore-Opening Deep Warming Technology



Очищення
Розкриття пор
Ліфтинг

Sonic Thermo Facial Brush & Face Lifter | 8 in 1

Вібраційна щіточка для обличчя з технологією зігрівання та ліфтингу

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Eye-Nose Area Targeted Design
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage
- Pore-Opening Deep Warming Technology
- MicroCurrent Face-Lift Technology
- Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

- Пульсації** До 18 рівнів інтенсивності та до 8000 об/хв
- Глибоке зігрівання** Стабільний підігрів поверхні з температурою до 41–43 °C для ефекту розкриття пор

Доступні кольори:



ПРИСТРОЇ HELLO KITTY З ТЕХНОЛОГІЄЮ SMARTSONIC PULSATION




Sonic Facial Brush | 4 in 1

Вібраційна щітка для обличчя

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage

Доступні кольори: ● ●

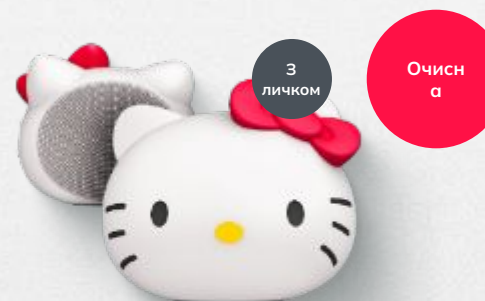

Sonic Facial Brush | 4 in 1

Вібраційна щітка для обличчя

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage

Доступний колір: ●



Sonic Thermo Facial Brush | 5 in 1

Вібраційна щітка для обличчя з технологією зігрівання

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- Smart Sonic Pulsation Technology (8.000 RPM)
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Youthful Glow Massage
- Pore-Opening Deep Warming Technology

Доступні кольори: ● ●

ПРИСТРОЇ З ТЕХНОЛОГІЄЮ SMARTSONIC PULSATION



Очищення
а
Ексофоліація

Sonic Body Brush & Intensive Exfoliator | 7 in 1

Вібраційна щітка для тіла з функцією інтенсивної ексофоліації

- SmartSonic Pulsation Technology
- Youthful Full Body Glow Massage Technology
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Super Soft & Flexible Silicone Tips
- Cushioning Soft Touch Experience
- Ergonomic Targeted Design
- Intensive Exfoliation Technology

Доступні кольори:



Очищення
а
Ексофоліація

Sonic Full-Body Brush & Intensive Exfoliator | 8 in 1

Вібраційна щітка для всього тіла з функцією інтенсивної ексофоліації

- SmartSonic Pulsation Technology
- Youthful Full Body Glow Massage Technology
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Super Soft & Flexible Silicone Tips
- Cushioning Soft Touch Experience
- Intensive Exfoliation Technology
- Adjustable Telescoping Handle
- Easy-Exchange Cleansing Head



Очищення
а
Ексофоліація
Регенерація

Sonic LED Full-Body Brush & Intensive Exfoliator | 9 in 1

Світлодіодна вібраційна щітка для всього тіла з функцією інтенсивної ексофоліації

- SmartSonic Pulsation Technology
- Youthful Full Body Glow Massage Technology
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Super Soft & Flexible Silicone Tips
- Cushioning Soft Touch Experience
- Intensive Exfoliation Technology
- Adjustable Telescoping Handle
- Easy-Exchange Cleansing Head
- Red Light Active Regeneration Technology

ПРИСТРОЇ З ТЕХНОЛОГІЄЮ SMARTSONIC PULSATION



Sonic Facial Roller | 4 in 1

Вібраційний ролер для обличчя



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation
Technology (14.000 RPM)



Smoothing & Tightening Skin Massage



3D Contouring & Firming Waves



Sonic Facial & Body Roller | 4 in 1

Вібраційний ролер для обличчя та тіла



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation
Technology (14.000 RPM)



Smoothing & Tightening Skin Massage



3D Contouring & Firming Waves

Доступні кольори:



Важлива інформація з безпеки



ТЕХНОЛОГІЯ SMARTSONIC PULSATION

Додаткова інформація щодо використання

Не використовуйте продукт на **подразненій чи ураженій шкірі** або **відкритих ранах** (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).

Цей продукт **не призначено** для лікування **медичних недоліків шкіри або захворювань**. Якщо у вас є медичні недоліки шкіри або захворювання, **проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту**.

ТЕХНОЛОГІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

РІШЕННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Що таке технологія охолодження?

- Техніка, за якої тіло на короткий термін піддається впливу низьких температур.
- Вона знижує температуру шкіри та тканин, що призводить до різних корисних фізіологічних ефектів.



Як працює технологія охолодження?

- Тимчасовий вплив низьких температур **зменшує запалення**.
- Викликає негайну фізіологічну реакцію шкіри та тканин.
- Початковий вплив холоду спричиняє звуження **кровоносних судин**, що робить шкіру пружнішою.

ТЕХНОЛОГІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

КОРИСТЬ

Зменшення набряків

- Сприяє зменшенню набряків обличчя.
- Надає обличчю свіжий і бадьорий вигляд.

Протизапальна дія

- Може зменшити запалення шкіри та почервоніння.
- Корисно для чутливої або подразненої шкіри.

Очищення пор

- Підтягує шкіру.
- Охолоджувальні засоби можуть тимчасово звужити пори.
- Сприяє гладкішій текстурі шкіри.

Підтримує кровообіг

- Тимчасово звужує кровоносні судини, а потім розширює їх.
- Поліпшує постачання кисню і засвоєння поживних речовин.
- Сприяє сяйному кольору обличчя.

Відновлення

- Освіжальний ефект.
- Відновлює шкіру, особливо вранці або після довготривалого дня.

Зменшення стресу

- Знімає напруження.
- Розслаблювальний ефект, який позитивно впливає не тільки на шкіру, але й на загальне самопочуття.

Полегшення болю

- Полегшує біль, пов'язаний із певними недоліками шкіри, травмами або м'язовими болями.



ПРИСТРОЇ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ОХОЛОДЖЕННЯ



Зменшення набряк ів Ревіталізація очей



Зменшення набряк ів Ревіталізація очей

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Глибоке охолодження Стабільне охолодження поверхні до $12,5 \pm 2,5$ °C.

Глибоке зігрівання Стабільне нагрівання поверхні до 39 ± 2 °C.

Доступні кольори:

Hello Kitty:

Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1

Масажер для очей із технологією охолодження та зігрівання

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology (11.000 RPM)

 Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology

 High Efficiency Depuffing System

 Youthful Glow Massage Technology

 Relaxing Eye-Warming Technology

Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1

Масажер для очей із технологією охолодження та зігрівання

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology (11.000 RPM)

 Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology

 High Efficiency Depuffing System

 Youthful Glow Massage Technology

 Relaxing Eye-Warming Technology



ТЕХНОЛОГІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

Додаткова інформація щодо використання

- **Не використовуйте** продукт на **подразненій чи пошкодженій шкірі або відкритих ранах** (після будь-яких травм), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт **не призначено** для лікування **медичних недоліків шкіри чи захворювань**. Якщо у вас є такі проблеми, **проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту**.
- Зона **очей** дуже чутлива: **будьте обережними та уникайте контакту продукту з повіками або самим оком**.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗІГРІВАННЯ

ВІДКРИТТЯ ПОР І ПОЛІПШЕНЕ ПОГЛИНАННЯ

Що таке технологія зігрівання?

- Процедура, яка передбачає застосування лагідного нагрівання до шкіри.
- Тепло під час термосеансів можна доставляти різними методами.
- Підвищує температуру поверхні шкіри та її глибших тканин.



Як працює технологія зігрівання?

- Термосеанси впливають на внутрішні механізми реакції організму на тепло.
- Основною реакцією на тепло є розширення кровоносних судин, що поліпшує кровообіг.
- Викликає прямий вплив метаболічних реакцій.
- У такий спосіб розслабляє тканини та сприяє їхньому відновленню.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗІГРІВАННЯ

КОРИСТЬ

Розслаблення м'язів

- Тепло допомагає розслабити м'язи обличчя.
- Корисно для зняття напруження та стресу.
- Сприяє більш спокійному вигляду та загальному поліпшенню самопочуття.

Поліпшення кровообігу

- Тепло поліпшує кровообіг шкіри.
- Підвищує доставлення кисню та поживних речовин.
- Сприяє загальному оздоровленню шкіри.

Поліпшене всмоктування продуктів для догляду за шкірою

- Тепло відкриває пори шкіри.
- Поліпшує всмоктування засобів для догляду за шкірою.
- Сприяє кращому засвоєнню активних інгредієнтів.
- Підвищує ефективність засобів для догляду за шкірою.

Стимуляція вироблення колагену

- Тепло може стимулювати вироблення колагену.
- Робить шкіру більш пружною та еластичною.
- Допомагає зменшити видимість дрібних зморщок.

Детоксикація шкіри

- Розширення кровоносних судин допомагає видаляти токсини зі шкіри.
- Сприяє покращенню стану шкіри.

Розслаблення і зменшення стресу

- Знімає стрес і забезпечує розслаблювальний ефект.
- Це важливо для здоров'я шкіри, бо надмірний стрес може погіршити шкірні проблеми.



ТЕХНОЛОГІЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОПРОМІНЕННЯ


ВІДКРИЙ СИЛУ СВІТЛОДІОДІВ У 8 КОЛЬОРАХ

Як працює технологія світлодіодного опромінення?

- Світлодіодна терапія полягає у використанні випромінювання, яке проникає в шкіру.
- Залежно від довжини хвилі, це світло може викликати різні біологічні реакції в клітинах.
- Світло позитивно впливає на діяльність клітин, тканин і ферментів.

Що таке технологія світлодіодного опромінення?

- NASA розробила світлодіодну технологію, щоб проводити експерименти над ростом рослин.
- Відтоді ця технологія виявилася перспективною у процесі загоєння ран і росту тканин.
- Світлодіодна терапія є неінвазивною і діє через проникнення в різні шари шкіри, використовуючи різну довжину кольорових хвиль для запуску природних реакцій.
- Регулярні сеанси є ключем для помітного покращення шкіри.

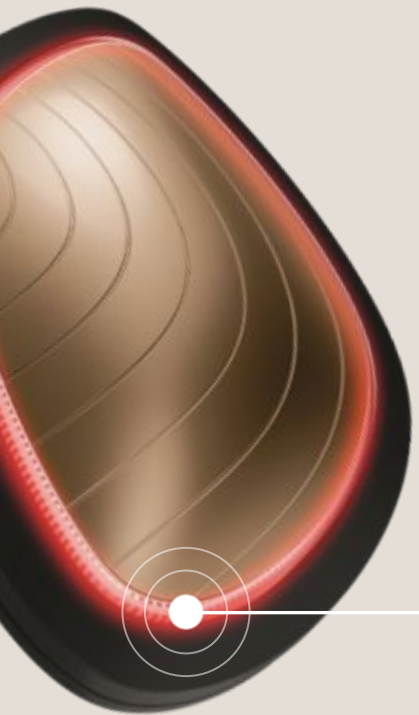

ТЕХНОЛОГІЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОПРОМІНЕННЯ

КОРИСТЬ

Червоний світлодіод Довжина хвилі 620–630 нм

стимулює вироблення колагену в шкірі, створюючи ефект підтягування та ліфтингу. Також може зменшити запалення та стимулює синтез білка, відповідального за молодий вигляд шкіри.

Синій світлодіод Довжина хвилі 465–475 нм

знищує бактерії, що спричиняють акне, і може допомогти запобігти висипу.

Ціановий світлодіод Довжина хвилі 490–520 нм

зменшує розмір набряклих капілярів, сприяє загоєнню, зменшує біль. Крім того, має протизапальний ефект, що заспокоює стресовану шкіру.

Жовтий світлодіод Довжина хвилі 580–590 нм

може полегшити розацеа, зменшити набряки, заспокоїти сонячні опіки та покращити загальний тон шкіри.

Біле світло світлодіодів Довжина хвилі 622+470+526 нм

може активувати природне оновлення шкіри, що призводить до її підтягування. Білі світлодіодні хвилі також зменшують набряки, проникаючи глибше в шкіру, ніж будь-які інші кольори світлодіодних хвиль.

Зелений світлодіод Довжина хвилі 526 нм

може допомогти з темними колами, а також пом'якшити пігментні плями та вирівняти тон шкіри.

Пурпуровий світлодіод Довжина хвилі 400–435 нм

це поєднання синіх та червоних світлодіодних хвиль. Цей колір може заспокоїти запалення, посилити сяйво та допомогти шкірі позбутися токсинів.

Помаранчевий світлодіод Довжина хвилі 600–610 нм

може відновити шкіру для природного та здорового сяяння та зменшити пошкодження, спричинене сонячними променями.



СВІТЛОДІОДНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТЕРМОПРОЦЕДУР


ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ



Зніми зовнішнє магнітне кільце та розмісти серветку GESKE на металевій поверхні пристрою.

Тоді нанеси потрібну маску на серветку, закріпи її кільцем і почни сеанс.

Доступні кольори:

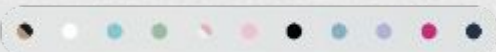

Сяянн
шкіри
Зменше
ння
набрякі
в
Тонізац
ія

Sonic Warm & Cool Mask | 8 in 1

Світлодіодний аплікатор для маски з функцією охолодження та зігрівання

- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Skin Scan & Personal Routine Guide
- Youthful Glow Massage Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- SmartSonic Pulsation Technology (10.000 RPM)
- Full Facial Hyper-Infusion Technology

Доступні кольори:



З
личком

Сяянн
шкіри
Зменше
ння
набрякі
в
Тонізац
ія

Sonic Warm & Cool Mask | 8 in 1

Світлодіодний аплікатор для маски з функцією охолодження та зігрівання

- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Skin Scan & Personal Routine Guide
- Youthful Glow Massage Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- SmartSonic Pulsation Technology (8.500 RPM)
- Full Facial Hyper-Infusion Technology

Доступний колір:



Сяянн
шкіри
Зменше
ння
набрякі
в
Тонізац
ія

Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1

Світлодіодний аплікатор для маски з функцією охолодження та зігрівання

- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Skin Scan & Personal Routine Guide
- Youthful Glow Massage Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- SmartSonic Pulsation Technology (11.000 RPM)
- Full Facial Hyper-Infusion Technology
- Eye-Nose Area Targeted Design



ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМОПРОЦЕДУР

Додаткова інформація щодо використання

- **Безпека й ефективність** продукту **ніколи не** оцінювались у поєднанні з **не-GESKE** продуктами для догляду за шкірою та масками.
- Ми рекомендуємо використовувати продукт тільки з продуктами GESKE.
- **Не використовуйте** продукт на **подразненій чи ураженій шкірі** або **відкритих ранах** (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт **не призначений** для лікування **недоліків чи захворювань шкіри**. Якщо у вас є медичні проблеми або захворювання шкіри, **проконсультуйтеся з дерматологом, перш ніж використовувати цей продукт**.
- **Продукт може випромінювати інтенсивне світло**; уникайте спрямування його на відкриті очі або поблизу них.
- Ділянка **навколо очей** дуже чутлива: **будьте максимально уважними** в цій зоні та **уникайте будь-якого контакту** продукту з **повіками або самим оком**.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для використання за таких умов:

- **Підвищена чутливість до тепла** (наприклад, теплова кропив'янка)

МІКРОСТРУМИ

ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ЛІФТИНГУ ОБЛИЧЧЯ

Що таке мікрострум?

Низько інтенсивний
низької інтенсивності

використовує дуже
малі струми для
лікування та стимуляції
м'язів і клітин тіла

Як працює мікрострум?

Пристрої з мікрострумами **підвищують активність м'язів**, поліпшуючи тонус м'язів обличчя та підвищуючи рівень аденозинтрифосфату (АТФ). АТФ відіграє критичну роль у виробленні колагену.

- Електричний струм **проходить від позитивного до негативного електрода**.
- Домашні пристрої мають зручні сфери для зручного використання.
- Обидва електроди мають торкатися шкіри, щоб струм почав поширюватися.
- Струм проходить через м'язи під шкірою, спонукаючи їх до тонізації.
- Основна увага приділяється тонізації м'язів, а не поверхні шкіри.
- Тренує **понад 65 м'язів обличчя та шиї**, покращуючи контури обличчя та борючися з ознаками старіння.

МІКРОСТРУМ

КОРИСТЬ

Підвищення пружності шкіри

- Стимулює м'язи обличчя, змушуючи їх скорочуватися та напружуватися.
- Поліпшує тонус м'язів.
- Зменшує в'ялість шкіри, надаючи їй більш пружний та підтягнутий вигляд.

Зменшення зморщок

- Допомагає розгладити та зменшити дрібні зморшки, підтримуючи м'язи в тонусі.

Вироблення колагену

- Сприяє виробленню колагену.
- Підвищуючи рівень колагену, процедура може підтримувати здатність шкіри протистояти утворенню зморщок.

Поліпшення кровообігу

- Електричні струми стимулюють кровообіг.
 - Поліпшує надходження кисню і поживних речовин до клітин шкіри.
- Стимулює оновлення клітин і підтримує життєву силу шкіри.

Лімфодренаж

- Сприяє лімфодренажу.
- Виводить зайву рідину й токсини.
- Зменшує набряки обличчя.
- Забезпечує більш скульптурний та чіткий контур обличчя.

Миттєве сяйво шкіри

- Активує клітинну активність і кровообіг.
- Надає шкірі свіжого та відновленого вигляду.



ПРИСТРОЇ З МІКРОСТРУМОМ



Ліфтинг
Пружність
Контур
вання

MicroCurrent Face-Lifter | 6 in 1

Мікрострумовий
ліфтинг-масажер

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(8.000 RPM)

 MicroCurrent Face-Lift Technology

 Anti-Aging Massage Technology

 Low-Voltage Current

 Ultra-Gentle Contouring &
Firming Spheres



Ліфтинг
Пружність
Контур
вання

MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1

Мікрострумовий ліфтинг-масажер
спрямованої дії

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(14.000 RPM)

 MicroCurrent Face-Lift Technology

 Anti-Aging Massage Technology

 Low-Voltage Current

 Ultra-Gentle Contouring &
Firming Spheres



Ліфтинг
Пружність
Контур
вання

MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1

Мікрострумовий ліфтинг-масажер
спрямованої дії

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(14.000 RPM)

 MicroCurrent Face-Lift Technology

 Anti-Aging Massage Technology

 Low-Voltage Current

 Ultra-Gentle Contouring &
Firming Spheres

ПРИСТРОЇ З МІКРОСТРУМОМ



Пружність
Ліфтинг
Регенерація

Skin Firming Wand | 7 in 1

Світлодіодний масажер для пружності та ліфтингу шкіри

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology (15.500 RPM)

 MicroCurrent Face-Lift Technology

 Youthful Glow Massage Technology

 Low-Voltage Current

 Red Light Active Regeneration Technology

 Thermo Deep Warming Technology



Пружність
Ліфтинг
Регенерація

Skin Firming Wand | 7 in 1

Світлодіодний масажер для пружності та ліфтингу шкіри

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology (15.500 RPM)

 MicroCurrent Face-Lift Technology

 Youthful Glow Massage Technology

 Low-Voltage Current

 Red Light Active Regeneration Technology

 Thermo Deep Warming Technology



МІКРОСТРУМИ

Додаткова інформація щодо використання

- Використовуй технологію MicroCurrent Face-Lift Technology **лише** в поєднанні зі **зволожувальним гелем MicroCurrent від GESKE або сироватками GESKE.**
- **Не використовуйте** функцію мікроструму в зоні грудей, на середній лінії шиї, статевих органах/паховій зоні, на червоній і запаленій шкірі, а також над родимками та розширеними кровоносними судинами.
- Під час використання може виникати відчуття легкого пощипування. Щоб зменшити або усунути це відчуття, необхідно зменшити інтенсивність мікроструму.
- **Не використовуй** продукт на **подразненій чи ураженій шкірі** або **відкритих ранах** (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт **не призначений** для лікування **недоліків чи захворювань шкіри**. Якщо у вас є медичні проблеми або захворювання шкіри, **проконсультуйтеся з дерматологом, перш ніж використовувати цей продукт.**
- **Шкіра навколо очей** дуже чутлива: **обробляй** цю зону з особливою обережністю, **уникаючи контакту** продукту з **повіками або очима.**

**У зазначених випадках
консультація лікаря
є необхідною для визначення,
чи продукт вам підходить:**

Якщо у вас є **серцеві захворювання**
У разі **вагітності.**

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для
використання за таких умов:

- **Імплантований медичний або інший електронний виріб, як-от кардіостимулятор**
- **Після лазерних процедур або хімічного пілінгу**
- **Після косметичних операцій на обличчі**



Використовуйте технологію MicroCurrent Face-Lift
тільки в поєднанні зі зволожувальним гелем
MicroCurrent від GESKE або сироватками GESKE.

ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ

ПОЛІПШЕНЕ ОЧИЩЕННЯ І ПОГЛИНАННЯ

Що таке іонна технологія?

- Використовує іони (заряджені атоми або молекули) для отримання корисного ефекту.
- Використовується в різних пристроях та продуктах, таких як фени, випрямлячі, засоби для очищення обличчя та інші інструменти для догляду за шкірою.

Як працює іонна технологія?

Взаємодія іонного заряду:

- Використовує притягання між протилежними зарядами.
- Позитивні іони притягують і видаляють негативно заряджені забруднення зі шкіри.
- Негативні іони розщеплюють молекули води на шкірі та сприяють поглинанню корисних речовин.

Електростатичні принципи:

- Базується на маніпулюванні зарядженими частинками (іонами) для отримання певного результату.
- Підвищує ефективність догляду за шкірою, використовуючи принципи електростатичного притягання та відштовхування.
- *Позитивні іони сприяють глибшому очищенню, притягуючи й вистоктуючи бруд.*
- *Негативні іони поліпшують поглинання поживних речовин шкірою у доглядальних засобах.*

ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ

КОРИСТЬ

ІОН⁺

Гігієнічна ексfolіація шкіри

- Позитивні іони ефективно притягують і нейтралізують негативно заряджені забруднення.
- Це сприяє ретельному очищенню, розкриттю пор і видаленню забруднень.

Детоксикація

- Позитивні іони допомагають виводити токсини зі шкіри.
- Підтримує природний процес детоксикації та сприяє загальному здоров'ю шкіри.

Анти вікові ефекти

- Позитивні іони сприяють підтягненню і зміцненню шкіри.
- Зменшує видимість дрібних зморщок.
- Сприяють більш молодому та пружному вигляду шкіри.

ІОН⁻

Поліпшене зволоження

- Негативні іони підвищують здатність шкіри утримувати вологу.
- Поліпшують зволоження.
- Корисно для людей із сухою або зневодненою шкірою.
- Сприяють рівнішому тону та еластичності шкіри.

Заспокоєння шкіри

- Негативні іони діють на шкіру заспокійливо.
- Зменшують запалення і заспокоюють подразнену або чутливу шкіру.
- Підходить для людей із почервоніннями або чутливою шкірою.

Зменшення стресу

- Негативні іони зменшують рівень стресу та сприяють релаксації.
- Впровадження технології негативних іонів у пристрої для догляду за шкірою може її заспокоїти та сприяти загальному оздоровленню шкіри через зменшення стресу.



ПРИСТРОЇ З ІОННОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ



Ексфо
ліація
Очище
ння
пор
Ліфтин
г

MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover| 9 in 1

Пристрій для ексфоціації та видалення чорних цяток із функцією ліфтингу



Skin Scan & Personal Routine Guide



Pore-Opening Deep Warming Technology



ION+ Ultra Hygienic Deep Cleansing



ION- Deep Nurturing Technology



Red Light Active Regeneration
Technology



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lift Technology



Dry and Dead Cell Removing Technology



Youthful Glow Massage Technology

Доступні кольори:



Hello Kitty:





ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ

Додаткова інформація щодо використання

- Під час використання може виникати відчуття легкого пощипування. Щоб зменшити або усунути це відчуття, необхідно зменшити інтенсивність мікроструму.
- Не використовуй продукт на подразненій чи ураженій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт не призначений для лікування недоліків чи захворювань шкіри. Якщо у вас є медичні проблеми або захворювання шкіри, проконсультуйтеся з дерматологом, перш ніж використовувати цей продукт.
- Шкіра навколо очей дуже чутлива: обробляй цю зону з особливою обережністю, уникаючи контакту продукту з повіками або очима.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не підходить для використання за таких умов:

- Імплантований медичний або інший електронний виріб, як-от кардіостимулятор
- Після лазерних процедур або хімічного пілінгу
- Після косметичних операцій на обличчі

**У зазначених випадках
консультація лікаря
є необхідною для визначення,
чи продукт вам підходить:**

Якщо у вас є серцеві захворювання
У разі вагітності.

МІКРОНІДЛІНГ

ТЕХНОЛОГІЯ ОНОВЛЕННЯ ШКІРИ

Що таке мікронідлінг?

- Малоінвазивна процедура для омолодження шкіри.
- Оснащено тонкими голками.
- Створює контрольовані мікротравми на шкірі.
- Стимулює природні процеси загоєння ран в організмі.
- Призводить до збільшеного вироблення колагену та еластину.



Як працює мікронідлінг?

Мікротравми:

- Тонкі голки пристрою проколюють шкіру.
- Створюються крихітні контрольовані мікротравми.
- Малоінвазивна процедура, якої достатньо для активації процесу загоєння.

Вироблення колагену:

- Організм реагує збільшеним виробленням колагену.
- Колаген підвищує міцність і еластичність шкіри.

Вироблення еластину:

- Вироблення еластину посилюється разом із колагеном.
- Еластин допомагає шкірі повернутися до початкової форми після розтягування або пощипування.

МІКРОНІДЛІНГ

КОРИСТЬ

Омолодження

- Стимуляція колагену та інших чинників росту може сприяти загальному омолодженню шкіри.
- Надає шкірі молодшого вигляду та свіжішого тону.

Стимуляція колагену

- Мікротравми, що створюються голками, стимулюють природний процес загоєння шкіри.
- Сприяє виробленню колагену та еластину.
- У результаті шкіра стає пружнішою та еластичнішою.

Покращена текстура шкіри

- Покращує текстуру шкіри, зменшуючи нерівності, дрібні зморшки та розмір пор.
- Сприяє гладшій і рівнішій шкірі.

Зменшення гіперпигментації

- Може допомогти зменшити пігментні плями й гіперпигментацію, сприяючи оновленню клітин шкіри.

Поліпшує всмоктування продуктів для догляду за шкірою

- Мікроотвори, що створюються мікроголками, можуть поліпшити поглинання засобів для догляду за шкірою.
- Після процедури продукти місцевого застосування краще проникають у шкіру та діють ефективніше.

Мінімальний час відновлення

- Порівнюючи з процедурами, що використовують глибше проникнення мікроголок, процедури з голками довжиною 0,3 мм зазвичай потребують мінімального часу на відновлення.
- Почервоніння шкіри швидко спадає.
- Більшість людей можуть швидко повернутися до своїх звичних справ.



ПРИСТРОЇ ДЛЯ МІКРОНІДЛІНГУ

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH



Оновлення
шкіри
Зменшення
зморщок
Очищення
пор



Оновлення
шкіри
Зменшення
зморщок
Очищення
пор



Оновлення
шкіри
Зменшення
зморщок
Очищення
пор

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Голки Мікронідлінгові ролери GESKE мають 540 / 1.680 ГОЛОК з нержавкої сталі довжиною 0,3 мм.

Доступні кольори:



MicroNeedle Face & Body Roller | 8 in 1

Світлодіодний ролер для
обличчя й тіла з мікроголками

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(14.000 RPM)

 Red Light Active
Regeneration Technology

 Energizing Cooling Technology

 Impurities Prevention Technology

 DeepDerma Skin Renewal &
Firming Technology

 Cell Stimulation System

 Fine Lines Refinement Technology

MicroNeedle Face & Body Roller | 9 in 1

Світлодіодний ролер
для обличчя й тіла з мікроголками

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(14.000 RPM)

 Red Light Active
Regeneration Technology

 Energizing Cooling Technology

 Impurities Prevention Technology

 DeepDerma Skin Renewal &
Firming Technology

 Cell Stimulation System

 Fine Lines Refinement Technology

 Detox Rose Quartz Spa Session

MicroNeedle Face Roller | 9 in 1

Світлодіодний ролер
для обличчя з мікроголками

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology
(14.000 RPM)

 Red Light Active
Regeneration Technology

 Energizing Cooling Technology

 Impurities Prevention Technology

 DeepDerma Skin Renewal &
Firming Technology

 Cell Stimulation System

 Fine Lines Refinement Technology

 Detox Rose Quartz Spa Session



МІКРОНІДЛІНГ

Додаткова інформація щодо використання

- **Використовуючи** насадку для мікронідлінгу, **застосовуй тільки легкий тиск**.
- Унаслідок процедури мікронідлінгу можуть утворитися **легкі набряки** або **синці**.
- **Уникайте фізичних навантажень і перебування під сонячними променями** протягом 24 годин після сеансу.
- Якщо ви не можете уникнути перебування під сонячними променями, **нанесіть** сонцезахисний крем **із високим ступенем SPF-захисту**.
- **Не наносьте макіяж** протягом 24 годин.
- **Уникайте** використання продуктів із **кислотами** та **ароматизаторами** під час і після сеансу.
- **Уникайте** використання **скрабів і пілінгів для обличчя** під час і після сеансу.
- Продукти з такими інгредієнтами, як **вітамін А** чи **С**, можуть **спричинити** сильніше **подразнення**.
- **Не використовуйте** продукт на **подразненій або ушкодженій шкірі** чи **відкритих ранах**, якщо є бактеріальні або вірусні інфекції шкіри.
- Цей продукт **не призначений** для лікування **медичних недоліків шкіри** чи **захворювань**.
- **Шкіра навколо очей** дуже чутлива: **обробляйте** цю зону з особливою обережністю, **уникаючи контакту** продукту з **повіками або очима**.
- Дезінфікуйте голку спиртовим спреєм перед кожним використанням та після нього.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для використання за таких умов:


- **Рак шкіри** та передракові стадії (актинічний кератоз)
- **Геморагічні захворювання** (вроджені порушення згортання крові)
- Приймання **медикаментів**, що впливають на згортання крові
- Після **лазерних процедур** або **хімічного пілінгу**
- Після **хірургічних операцій на обличчі**.

**У зазначених випадках
консультація лікаря
є необхідною для визначення,
чи продукт вам підходить:**

Якщо у вас є **серцеві захворювання**.
У разі **вагітності**.
Якщо вам введено **дермафілери** або **ін'єкції**.

Що таке мікродермабразія?

- Мікродермабразія — це неінвазивна процедура для догляду за шкірою.
- Вона спрямована на ексfolіацію зовнішнього шару шкіри.
- Використовує спеціальне обладнання для видалення мертвих клітин шкіри та забруднень і відкриває свіжу та молоду шкіру.

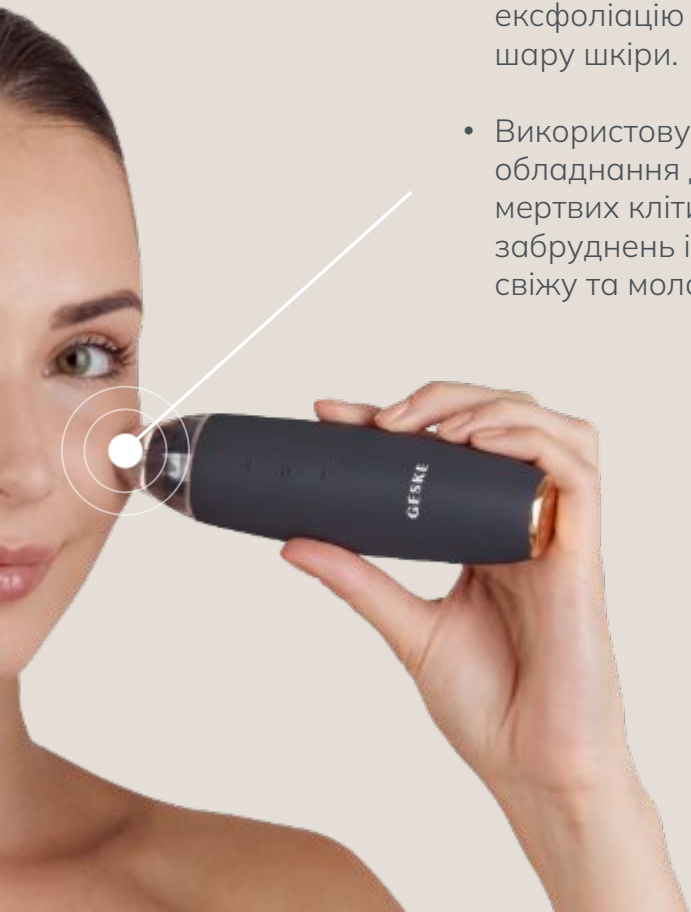

МІКРОДЕРМАБРАЗІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ЗГЛАДЖЕННЯ ШКІРИ

Як працює мікродермабразія?

Тертя:

- Використовує пристрій з абразивною поверхнею з дрібних кристалів або паличку з наконечником у формі діаманта.
- Фізично відлущує верхній шар шкіри, видаляючи мертві клітини шкіри та забруднення.

Всмоктування:

- Працює разом із тертям і використовує всмоктування для вакуумування відлущених клітин шкіри.
- Збільшує приплив крові та стимулює вироблення колагену й нових клітин шкіри.

Видалення ороговілого шару шкіри:

- Поверхня, що спричиняє тертя, і функція всмоктування видаляють зовнішній шар шкіри.
- Це забезпечує контрольовану та точну механічну ексfolіацію, що впливає лише на поверхневий шар.

Стимуляція оновлення шкіри:

- Видалення зовнішнього шару стимулює природний процес оновлення шкіри.
- Сприяє заміні втрачених клітин шкіри новими та здоровими, покращує текстуру та зовнішній вигляд шкіри.

МІКРОДЕРМАБРАЗІЯ

КОРИСТЬ

Текстура й тон шкіри

- Видалення мертвих клітин шкіри робить її більш гладкою і рівною.
- Може усунути видимі плями, нерівний тон шкіри та загальну тьмяність.
- Залишає шкіру свіжою і відновленою на вигляд.

Проти акне та постакне

- Може бути корисною для людей із легким та помірним акне.
- Очищає пори.
- Видаляє мертві клітини шкіри та зменшує надлишковий жир.
- Допомагає мінімізувати появу постакне завдяки постійній ексфоціації.

Очищення пор

- Може сприяти звуженню на вигляд порам.
- Робить текстуру шкіри гладшою і досконалішою.

Зменшення дрібних і більших зморщок

- Стимулює вироблення колагену — важливого білка, який відповідає за збереження еластичності та пружності шкіри.
- Допомагає підтягнути шкіру та зменшити на вигляд дрібні й більші зморшки.

Видалення чорних цяток

- Чорні цятки — це маленькі темні ураження, спричинені забитими порами.
- Через них поверхня шкіри може мати грубий, нерівний та тьмянний вигляд.
- Видалення чорних цяток може сприяти чистішому, гладкішому та сяйливішому тону шкіри.



ПРИСТРОЇ З МІКРОДЕРМАБРАЗИЄЮ



Очищен
ня пор
Омолод
ження
Оновле
ння
клітин

MicroDermabrasion Blackhead Remover | 7 in 1

Пристрій для видалення чорних
цяток із функцією мікродермабразії

-  Skin Scan & Personal Routine Guide
-  AirPulse Suction
Deep Pore Cleansing
-  Skin Rejuvenation
Technology
-  MicroDermabrasion
Technology for Skin Impurities
-  Cell Renewal System
-  UltraSpin Exfoliation
Technology
-  Red Light Active
Regeneration Technology

Доступні кольори:



Насадки

Насадка для обличчя	Насадка для тіла	Насадка для чорних цяток
		
Диски для тіла	Диски для обличчя	Фільтри
 помірна інтенсивність (блакитний)	 помірна інтенсивність (блакитний)	
 висока інтенсивність (червоний)	 чутлива шкіра (зелений)	
	 висока інтенсивність (червоний)	
	 надчутлива шкіра (жовтий)	



МІКРОДЕРМАБРАЗІЯ

Додаткова інформація щодо використання

- **Ніколи** не використовуйте функцію всмоктування **на одній і тій самій ділянці** протягом тривалого часу, щоб запобігти подразненню шкіри, утворенню набряків або легких синців.
- **Не використовуйте** продукт на **подразненій або травмованій шкірі** чи **відкритих ранах**, якщо є бактеріальні або вірусні інфекції шкіри.
- Цей продукт **не призначений** для лікування **недоліків чи захворювань шкіри**. Якщо у вас є медичні проблеми або захворювання шкіри, **проконсультуйтеся з дерматологом, перш ніж використовувати цей продукт**.
- Ділянка **навколо очей** дуже чутлива: **будьте максимально уважними** в цій зоні та **уникайте будь-якого контакту** продукту з **повіками або самим оком**.
- Підвищений **ризик рубцювання** для **шкіри V та VI типів** за шкалою **Фіцпатріка**
- Підвищений **ризик гіперпігментації** для **шкіри III–V типів** за шкалою **Фіцпатріка**
- **Завжди** починайте із **найнижчої** інтенсивності. Бажаним є м'яке та стабільне використання. Вища інтенсивність означає **вищий ризик** небажаних ефектів.
- **Застосовуйте** тільки **легкий тиск**.
- Рекомендується **уникати** перебування під **прямими сонячними променями** за **3-4 тижні** до будь-якого використання пристрою.
- Після використання пристрою необхідно уникати перебування під **прямими сонячними променями протягом** наступних **4–8 тижнів**. Якщо уникнути перебування під сонячними променями неможливо, користуйтеся кремом із **SPF не менше 30**. Ми рекомендуємо використовувати крем із SPF 50.
- **Уникайте** фізичних вправ, плавання та **нанесення макіяжу** протягом 24 годин після сеансу.
- Для **запобігання інфекціям шкіри** рекомендовано **наносити антисептичний крем** після використання та ретельно зволожувати шкіру.
- **Інтенсивне використання** з підвищеною інтенсивністю **може призвести до появи** поверхневих саден. Чим **вища інтенсивність**, тим **вищий ризик**. Якщо ви маєте сумніви, **проконсультуйтеся** зі своїм **дерматологом**, перш ніж використовувати цей пристрій.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для використання за таких умов:

- **Рак шкіри** та передракові стадії (актинічний кератоз)
- **Геморагічні захворювання** (врожені порушення згортання крові)
- Приймання **медикаментів**, що впливають на **згортання крові**
- Після **лазерних процедур** або **хімічного пілінгу**
- Після пластичних операцій на обличчі

У зазначених випадках консультація лікаря є необхідною для визначення, чи продукт вам підходить:

Якщо у вас є **серцеві захворювання**.
У разі **вагітності**.
Якщо вам введено **дермафілери** або **ін'єкції**.

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ТУМАН

ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СЯЯННЯ

Що таке
зволожувальний туман?

- Створений для миттєвого зволоження та освіження шкіри.
- Дає змогу рівномірно розподілити по обличчю тонкий туман рідини.



Як працює зволожувальний туман?

- Працює через розщеплення крапель води на ультрамалі молекули.
- Проникає в шкіру у вигляді туману.
- Допомогає ефективним інгредієнтам проникнути крізь поверхневий шар шкіри.
- Шкіра буде чудово зволожена та омолоджена.
- Можна використовувати під час тривалих подорожей, спекотного літа або як щоденний заряд свіжості для шкіри.

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ТУМАН

КОРИСТЬ

Посилювач зволоження

- Допомагає зволожити шкіру.
- Захищає шкіру від зневоднення.
- Корисно в сухих або кондиціонованих приміщеннях.

Освіження

- Надає миттєве відчуття свіжості.
- Це допоможе заспокоїти шкіру.
- Полегшує дискомфорт від спеки або впливу сонця.

Тон і сяяння шкіри

- Допомагає підтримувати рівний тон шкіри.
- Відновлює природне сяйво шкіри.
- Підсилює природне сяйво.
- Надає обличчю більш живого вигляду.

Фіксація макіяжу

- Підходить для фіксації макіяжу.
- Надає макіяжу природнішого вигляду.
- Допомагає зафіксувати макіяж.



ПРИСТРОЇ ЗІ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИМ ТУМАНОМ



Зволож
ення
Фіксаці
я
макіяжу
Освіжен
ня

Facial Hydration Refresher | 4 in 1

Зволожувальний освіжувач для обличчя



Skin Scan & Personal Routine Guide



Moisturizing Cooling Mist



Energizing Hydra Refreshing Technology



Redness and Dry Skin Reducer



Зволож
ення
Фіксаці
я
макіяжу
Освіжен
ня

Facial Hydration Refresher | 4 in 1

Зволожувальний освіжувач для обличчя



Skin Scan & Personal Routine Guide



Moisturizing Cooling Mist



Energizing Hydra Refreshing Technology



Redness and Dry Skin Reducer



Зволож
ення
Фіксаці
я
макіяжу
Освіжен
ня

Facial Hydration Refresher | 4 in 1

Зволожувальний освіжувач для обличчя



Skin Scan & Personal Routine Guide



Moisturizing Cooling Mist



Energizing Hydra Refreshing Technology



Redness and Dry Skin Reducer

Доступні кольори:



Hello Kitty:





ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ТУМАН

Додаткова інформація щодо використання

- **Не використовуйте** цей продукт на подразненій або травмованій шкірі чи на **відкритих ранах** (після будь-яких ушкоджень) або за наявності бактеріальних чи вірусних інфекцій шкіри.
- Цей продукт **не призначений** для лікування **медичних недоліків або захворювань шкіри**.
- Ділянка **навколо очей** дуже чутлива: **будьте максимально уважними** в цій зоні та **уникайте будь-якого контакту** продукту з **повіками або самим оком**.
- **Наповнюйте** пристрій **лише водою** або м'яким тоніком.
- **Не наповнюйте** пристрій іншими рідинами, такими як **рідкі засоби для очищення обличчя, дезінфекційні засоби, спирт, агресивні хімічні речовини або розчини з пігментами**, як-от спрей для засмаги.
- **Не наповнюйте** резервуар **ні гарячою, ні киплячою водою**.
- **Після** наповнення резервуара **водою завжди переконайтеся, що він закритий, щоб запобігти протіканню**.
- **Не заряджайте** пристрій, якщо **резервуар наповнений водою**.

ВОДЯНА ПАРА

ТЕХНОЛОГІЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ПОР

Що таке водяна пара?

- Призначений для зволоження обличчя та глибокого очищення пор.
- У пристрої використовується вода або м'який очищувальний розчин для глибокого очищення, ексfolіації та зволоження шкіри.
- Дія спрямована на поліпшення вигляду шкіри.

Як працює водяна пара?

- Використовує високошвидкісний струмінь води.
- Делікатно видаляє мертві клітини шкіри, забруднення та бруд.
- М'який до шкіри, запобігає пошкодженням.
- Видаляє мертву шкіру та забруднення.
- Стимулює глибокі шари шкіри для поліпшення кровообігу.
- Сприяє виробленню колагену та еластину для покращення текстури та пружності шкіри.
- Подає індивідуально підібрані сироватки через насадку пристрою.
- Зволожує шкіру за допомогою води, яка використовується для гідроексfolіації.

ВОДЯНА ПАРА

КОРИСТЬ

Ультрагігієнічне глибоке очищення

- Видаляє забруднення, жир і бруд.
- Допомогає запобігати акне та поліпшує чистоту шкіри.

Відлущування

- Видаляє мертві клітини шкіри.
- Сприяє гладенькій і сяйній шкірі.
- Зменшує видимість дрібних зморщок.

Поліпшення кровообігу

- Стимулює кровообіг і лімфодренаж.
- Поліпшує здоров'я та вигляд шкіри.

Підвищене зволоження

- Збагачує шкіру зволожувальними сироватками.
- Підвищує рівень вологи та еластичність шкіри.

Підходить для всіх типів шкіри

- Ніжний і підходить для чутливої шкіри.
- Регульована інтенсивність.
- Протизапальна дія.

ПРИСТРОЇ З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ



Очищен
ня пор
Ексфолі
ація
Зволожу
вальна

Aqua-Stream Face Cleanser | 8 in 1

Пристрій для інтенсивного очищення обличчя струменем води



Skin Scan & Personal Routine Guide



AirPulse Suction
Deep Pore Cleansing



Hydrating Ultra
Deep Aqua Cleansing



Impurities Prevention
Technology



Superior Blackhead
Extraction Technology



Exfoliating Aqua-Stream
Technology



Energizing Hydra
Refreshing Technology



Redness and
Dry Skin Reducer

Доступні кольори:





ТЕХНОЛОГІЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ

Додаткова інформація щодо використання

- **Ніколи** не використовуйте функцію всмоктування **на одній і тій самій ділянці** протягом тривалого часу, щоб запобігти подразненню шкіри, утворенню набряків або легких синців.
- Почни з **найнижчої інтенсивності, поступово збільшуючи** її за потреби.
- **Не використовуй** продукт на **подразненій чи ураженій шкірі** або **відкритих ранах** (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт **не призначений** для лікування **медичних недоліків шкіри** або **захворювань**. Якщо у вас є медичні недоліки шкіри або захворювання, **проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту**.
- **Ділянка навколо очей** дуже чутлива: **обробляйте цю зону з особливою обережністю та уникай будь-якого контакту** продукту з **повіками** або **самим оком**.
- Завжди тримай пристрій вертикально під час використання, інакше він вимкнеться.
- **Заповнюй** пристрій лише м'яким тонером (GESKE Aqua-Stream Solution) або **водою**.
- **Не наповнюй** пристрій іншими рідинами такими як **рідкі засоби для очищення обличчя, дезінфекційні засоби, спирт** або інші **агресивні хімічні речовини**.
- **Не використовуй** пристрій для **розпилювання засобів для засмаги** та **не наповнюй** його **розчинами, що містять пігменти**.
- **Не наповнюйте** резервуар **ні гарячою, ні киплячою водою**.
- **Після наповнення резервуара водою завжди переконайтеся, що він закритий, щоб запобігти протіканню**.
- **Не заряджай пристрій, коли резервуар для води наповнений**.



Щоб досягти найкращих результатів, використовуй пристрій Aqua-Stream разом із GESKE Aqua-Stream Solution.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для використання за таких умов:

- Після **лазерних процедур** або **хімічного пілінгу**
- Після **хірургічних операцій** на **обличчі**.

**У зазначених випадках
консультація лікаря
є необхідною для визначення,
чи продукт вам підходить:**

Якщо у вас є **серцеві захворювання**.
У разі **вагітності**.

Якщо вам введено **дермафілери** або **ін'єкції**.

ЛІМФОМАСАЖ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАБРЯКІВ

СЯЙВО ЗАВДЯКИ КОНТРОЛЬОВАНІЙ ТЕМПЕРАТУРИ

Як працює лімфомасаж для зняття набряків?

Що таке лімфомасаж для зняття набряків?

- Використовується для стимуляції лімфатичної системи, яка є частиною імунної системи організму.
- Сприяє виведенню шлаків і токсинів з тканин організму.
- Може допомогти зменшити набряки.
- Посилює виведення зайвої рідини з організму.
- Поліпшує загальне самопочуття.

- Активує відкриття початкових лімфошляхів — крихітних судин лімфатичної системи.
- Збільшує поглинання рідини та відходів із тканин.
- Використовує ніжні, ритмічні масажні рухи, щоб сприяти потоку лімфи.
- Рухається у природному напрямку лімфатичного потоку, сприяє дренажу рідини.



ЛІМФОМАСАЖ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАБРЯКІВ

КОРИСТЬ

Зменшення набряків

- Сприяє стимуляції відтоку лімфатичної рідини.
- Зменшує набряки та здуття, особливо на обличчі, ногах і щиколотках.

Детоксикація

- Транспортує відходи від тканин назад до серця.
- Допомагає виводити токсини з організму.

Зміцнює імунну систему

- Лімфатична система є важливою частиною імунної системи.
- Її стимуляція може допомогти поліпшити здатність твого організму боротися з інфекціями.

Покращення вигляду шкіри

- Може покращити текстуру шкіри та зменшити набряки, особливо під очима.
- Сприяє виведенню токсинів і поліпшенню кровообігу.

Розслаблення

- Ніжні, заспокійливі рухи лімфатичного масажу можуть бути дуже розслаблювальними.
- Допомагає знизити рівень стресу.

Поліпшення кровообігу

- Може поліпшити кровообіг у всьому тілі.
- Підвищує рівень енергії та забезпечує ефект оксигенації.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЛІМФОМАСАЖУ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАБРЯКІВ



Скульптування
обличчя
Поліпшення
кровообігу

Cool & Warm
Eye and Face Massager | 7 in 1
Масажер для очей і обличчя з функцією
охолодження та зігрівання

-  Skin Scan & Personal Routine Guide
-  Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
-  Pore-Opening Deep Warming Technology
-  High Efficiency Depuffing System
-  Youthful Skin & Complexion Renewal
-  Eye-Nose Area Targeted Design
-  Silicone Grip Protection Sleeve



Скульптування
обличчя
Поліпшення
кровообігу

Cool & Warm
Eye Massager | 7 in 1
Масажер для очей з функцією
охолодження та зігрівання

-  Skin Scan & Personal Routine Guide
-  Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
-  Pore-Opening Deep Warming Technology
-  High Efficiency Depuffing System
-  Youthful Skin & Complexion Renewal
-  Easy Finger Loop Design
-  Silicone Grip Protection Sleeve



Скульптування
обличчя
Поліпшення
кровообігу

Cool & Warm
Duo Eye Massager | 7 in 1
Масажер для очей з функцією
охолодження та зігрівання, 2 шт.

-  Skin Scan & Personal Routine Guide
-  Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
-  Pore-Opening Deep Warming Technology
-  High Efficiency Depuffing System
-  Youthful Skin & Complexion Renewal
-  Comfortable Eye-Targeted Design
-  Silicone Grip Protection Sleeve

Доступні кольори:



ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЛІМФОМАСАЖУ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАБРЯКІВ



Скульптур
ування
обличчя й
тіла
Поліпшен
ня
кровообіг
у

Cool & Warm Face and Body Massager | 7 in 1

Масажер для обличчя й тіла з функцією
охолодження та зігрівання



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Cryo Deep Cooling Revitalizing
Technology



Pore-Opening Deep
Warming Technology



High Efficiency
Depuffing System



Youthful Skin & Complexion
Renewal



Targeted Pressure
Design



Silicone Grip
Protection Sleeve



Скульптур
ування
обличчя й
тіла
Поліпшен
ня
кровообіг
у

Sonic Cool & Warm Face and Body Massager | 9 in 1

Масажер для обличчя й тіла з функцією
охолодження та зігрівання



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Cryo Deep Cooling Revitalizing
Technology



Pore-Opening Deep
Warming Technology



High Efficiency
Depuffing System



Youthful Skin & Complexion
Renewal



SmartSonic Pulsation Technology



Silicone Grip
Protection Sleeve



Youthful Glow
Massage Technology



Red Light Active
Regeneration Technology

Доступні кольори:





ТЕХНОЛОГІЯ ЛІМФОМАСАЖУ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАБРЯКІВ

Додаткова інформація щодо використання

- Завжди використовуйте Silicone Grip Protection Sleeve для утримування пристрою, щоб уникнути опіків або обмороження пальців.
- Не використовуйте продукт на подразненій чи ураженій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких ушкоджень), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях).
- Цей продукт **не призначений** для лікування **медичних недоліків шкіри або захворювань**. Якщо у вас є медичні недоліки шкіри або захворювання, **проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту**.
- Ділянка **навколо очей** дуже чутлива: **будь максимально уважною** в цій зоні та **уникайте будь-якого контакту** продукту з **повіками або самим оком**.
- **Ніколи** не опускайте пристрій у киплячу гарячу воду. Використовуйте тільки **теплу воду (не більше 40 °C)** для підігріву.
- Поверхня **ніколи не має бути гарячою**, а лише трохи теплою.
- **Ніколи** не кладіть пристрій у морозильну камеру. Користуйтеся тільки холодильником для охолодження (**не нижче 10 °C**).
- Поверхня **в жодному разі не має бути крижаною**, а лише трохи охолодженою.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Продукт не **підходить** для використання за таких умов:

- **Підвищена чутливість до високих або низьких температур** (наприклад, теплова/холодова кропив'янка).

БЕЗКОНТАКТОВИЙ МАГНІТНИЙ ПІЛІНГ

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ОЧИЩЕННЯ

Як працює безконтактний магнітний пілінг?

- Магнітна очищувальна маска GESKE наноситься тонким шаром на шкіру.

Магнітні поля:

- Магніт у наконечнику безконтактного засобу для зняття маски GESKE створює магнітне поле навколо шкіри.

Магнітні матеріали:

- Магнітна очищувальна маска GESKE містить, серед іншого, дрібні частинки заліза, які взаємодіють із пристроєм.

Процес притягування:

- У магнітному полі пристрою GESKE частинки заліза маски вирівнюються за цим полем. Коли частинки прилипають до шкіри, магніт обережно витягує їх разом із мертвими клітинами шкіри, забрудненнями та шкірним салом.

Намагнічення заліза:


- Маленькі, високомагнітні частинки заліза маски притягуються до магніту пристрою GESKE.

Агрегація:


- Частинки заліза в масці вирівнюються вздовж ліній магнітного поля та прилипають до магніту.

Що таке безконтактний магнітний пілінг?

- Процедура з використанням магнітного пристрою.
- Використовується для ретельного безконтактного видалення маски.

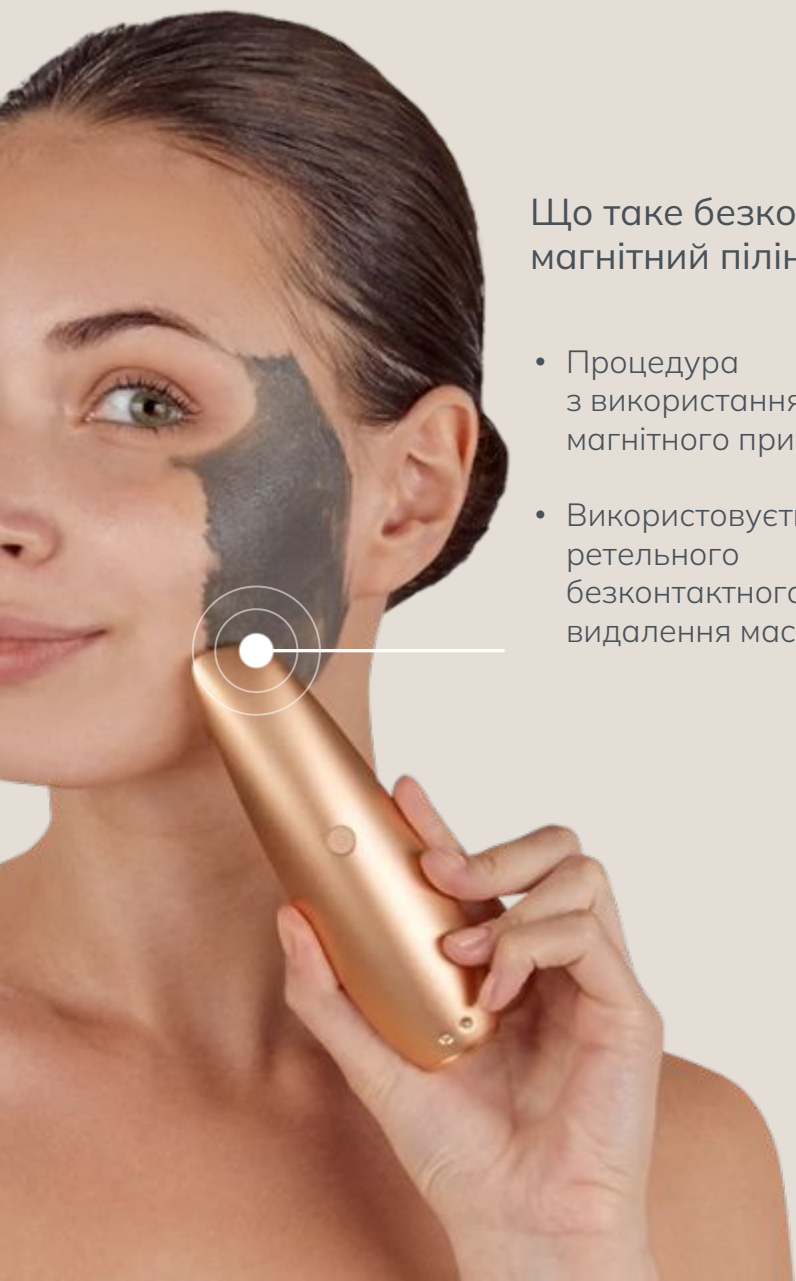

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКООНТАКТНОГО ПІЛІНГУ

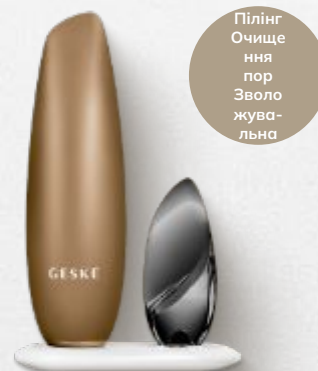

Пілінг
Очище
ння
пор
Зволо
жува
льна

Touchless Magnetic Peeling Mask | 5 in 1

Магнітна маска з функцією
безконтактного пілінгу



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation
Technology



Touchless Purifying
Peeling Technology




Youthful Glow
Massage Technology



Magnetic Cell
Stimulation

Доступні кольори:

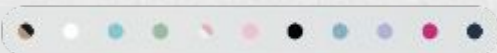

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



МАГНІТНОЮ ОЧИСНОЮ
МАСКОЮ GESKE

ТРИМЕРИ



Безболісн
е
видалення
волосся
Гігієнічні
леза

Precision Trimmer | 4 in 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



Hypoallergenic Precision
Trimming Blades



Painless Hair Removal System



Exchangeable Environmentfriendly
Blade System

КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ

Косметичні продукти GESKE містять інгредієнти, корисні для шкіри, та підходять для щоденного використання. Більшість наших формул є веганськими та не тестуються на тваринах. До того ж усі продукти було розроблено за участі провідних німецьких дерматологів. Косметичні засоби можна комбінувати з відповідними пристроями GESKE для досягнення найкращих результатів. Ми пропонуємо різноманітні очищувачі, сироватки, креми та маски для обличчя, щоб забезпечити оптимальний догляд для будь-якого типу шкіри.

ОСНОВНІ ІНГРЕДІЄНТИ ТА ПЕРЕВАГИ

Гіалуронова кислота

Може утримувати багато води, тому вона настільки ефективна в боротьбі з в'ялістю та сухістю шкіри. Природно виробляється організмом, але з віком її вироблення скорочується. Підтримує зволоження шкіри, зменшуючи, поміж іншим, прояви зморщок, спричинених сухістю, та відновлюючи еластичність шкіри.

Колаген

Колаген — це білок, що природно виробляється в організмі та, зокрема, сприяє зміцненню шкіри. У кремах він діє зовнішньо, надаючи шкірі необхідне зволоження, щоб вона мала свіжий та сяйний вигляд.

Вітамін B5

Доповнює ефект очищення, запобігаючи появі прищиків і чорних цяток і поліпшуючи еластичність шкіри.

Вітамін E

Сприяє природному захисному бар'єру шкіри, підвищує її стійкість і сприяє чистоті та свіжості.

Гліцерин

Пом'якшує і згладжує шкіру, допомагає утримувати вологу, що робить її корисною для сухої шкіри.

Алое вера

Охолоджує та заспокоює шкіру, зволожує, зменшує запалення і сприяє її регенерації.

Мигдалева олія

Її численні ненасичені жирні кислоти проникають глибоко в шкіру та інтенсивно зволожують. Мигдалева олія також містить пальмітинову кислоту, природний захисний компонент шкіри.



ОЧИЩЕННЯ



Очисний лосьйон
для нормальної шкіри

Вітамін Е — чинить антиоксидантну дію, розгладжує
Мигдалева олія — живить, зволожує
Гамамеліс (із ліщиною) — антиоксидант, знімає свербіж

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Інтенсивний догляд і зволоження
- Не пініться



Зволожувальний очисний засіб
для нормальної та комбінованої шкіри

Екстракт огірка — освіження, протизапальна дія
Провітамін В5 (пантенол) — зволоження, протизапальна дія
Екстракт бузини — заспокоєння шкіри

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- М'яко видаляє макіяж на водній основі
- Формула, що пініться



Засіб для очищення обличчя
для нормальної та жирної шкіри

Гліцерин — зволоження
Провітамін В5 (пантенол) — зволоження, протизапальне
Алое вера — зволоження, освіження, протизапальна дія

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Готує шкіру до сироваток і зволожувачів
- Формула, що пініться



Очисний пілінг
для нормальної та жирної шкіри

Пілінг із порошком бамбука — м'яке очищення
Провітамін В5 (пантенол) — зволоження, протизапальне
Алое вера — зволоження, освіження, має протизапальну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Очищувальний скраб для світлої шкіри обличчя
- Готує шкіру до сироваток і зволожувальних засобів

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ (очисні)



Магнітна очисна маска

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



Touchless Magnetic
Peeling Mask | 5 in 1

для всіх типів шкіри

Токоферол — антиоксидант, розгладжує шкіру

Аскорбіл пальмітат — антиоксидант, тонізація

Гліцерин — зволоження шкіри



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Зволожує та заспокоює шкіру

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ВАЖЛИВО

Зображення на масці вказує на потрібний пристрій. Враховуйте, що для кожного пристрою Sonic Mask потрібен свій розмір серветки. Щоб уникнути проблем, переконайтеся, що ви правильно підбираєте маску до пристрою.

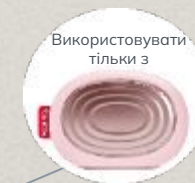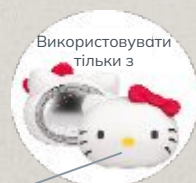

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



Очисна маска

для всіх типів шкіри

Соєвий протеїн — зволоження
і заспокоєння

Арганова олія — антиоксидант

Олія насіння кунжуту та чорного кмину

—

живить, зволожує

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Детокс для шкіри
- Формула для оновлення шкіри



Детоксикаційна денна маска

для нормальної та чутливої шкіри

Олія CBD — зволоження

Олія манго — заспокоює та зволожує шкіру

Олія абрикосових кісточок — розгладжує
шкіру, чинить антиоксидантну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Протизапальна дія
- Захисна формула

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



Sonic Warm &
Cool Mask | 9 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



Освіжальна
й відновлювальна маска

для нормальної та сухої шкіри

Вітамін Е — антиоксидант, заспокоює
Мигдалева олія — живить, зволожує
Олія авокадо — регенерує, зволожує

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Живить шкіру завдяки ніжним інгредієнтам
- Освіжальна формула



Маска для цілодобового
зволоження

для нормальної та сухої шкіри

Ніацинамід — антивіковий ефект, звуження пор, заспокоєння
Керамід 3 — зміцнює бар'єр, зволожує
Сквалан — запобігає втраті вологи, антиоксидант

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Відновлює шкіру завдяки зволоженню
- Зволожувальна формула



Ультразволожувальна
маска

для зневодненої шкіри

Гіалуронан — розгладжує, тонізує
Олія ши — живить, зволожує
Зелений чай — заспокоює

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Формула для сяяння шкіри
- Для свіжості обличчя та м'якості шкіри

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



Sonic Warm &
Cool Mask | 9 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



Енергетична
денна маска

для нормальної та сухої шкіри

Сквалан — запобігає втраті вологи, антиоксидант
Кофеїн — живить, чинить детоксикаційний ефект
Олія горіха макадамії — зволожує

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Відновлювальна формула



Відлущувальна
денна маска

для нормальної та сухої шкіри

Гіалуронан — розгладжує, тонізує
Олія ши — живить, зволожує
Вітамін Е — чинить антиоксидантну дію, розгладжує

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Формула для сяяння шкіри
- Допомогає в разі зневоднення шкіри



Денний гель-маска
для чутливої шкіри

для чутливої, подразненої шкіри

Провітамін В5 (пантенол) — зволожує, чинить протизапальну дію, тонізує
Алое вера — зволожує, освіжає
Екстракт опунції — заспокоює, чинить антиоксидантну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- М'яка формула
- Зволожує шкіру гелевою маскою

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



Sonic Warm &
Cool Mask | 9 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



Омолоджувальна
маска

для всіх типів шкіри

Гіалуронан — розгладжує, тонізує
Алое вера — зволожує, освіжає
Вітаміни Е та С — чинять антиоксидантну дію, живлять

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Омолоджена шкіра, що сяє
- Живильна формула
- для ніжного сяння



Заспокійлива та
розслаблювальна маска

для нормальної шкіри

Олія ши — живить, зволожує
Кокосова олія — зволожує, чинить антиоксидантну дію
Олія маракуй — чинить антиоксидантну дію, заспокоює

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Допомогає шкірі зняти стрес
- Формула для зняття запалення



Омолоджувальна
маска з вітамінами

для нормальної шкіри

Вітамін А — анти вікова дія, антиоксидантна дія
Вітамін Е — чинить антиоксидантну дію, розгладжує
Вітамін F — зволожує, чинить антиоксидантну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Поліпшує еластичність шкіри та зменшує дрібні зморшки
- Збагачувальна формула

ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙ ІЗ



Sonic Warm &
Cool Mask | 9 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1



Sonic Warm &
Cool Mask | 8 in 1

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



Омолоджувальна
нічна маска

для сухої шкіри

Вітамін Е — чинить антиоксидантну дію, розгладжує
Вітамін А — розгладжує та живить шкіру
Олія авокадо — регенерує, зволожує

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Живить шкіру під час сну
- Формула збагачення



Відновлювальна
й регенерувальна нічна маска

для нормальної та сухої шкіри

Вітамін Е — чинить антиоксидантну дію, розгладжує
Олія авокадо — регенерує, зволожує
Мигдалева олія — живлення, зволоження

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Підтримує нічне відновлення шкіри
- Відновлювальна формула

СИРОВАТКИ ТА ГЕЛІ



Сироватка з гіалуроновою
кислотою

для всіх типів шкіри

Гіалуронова кислота — розгладжує, тонізує
Провітамін B5 (пантенол) — зволожує, чинить протизапальну дію
Бетаїн — живить, зволожує

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Глибоке зволоження
- Гіалуронова кислота потрійної дії для максимального ефекту



Зволожувальна
сироватка

для нормальної та жирної шкіри

Гіалуронан — розгладжує, тонізує
Вітамін А — розгладжує та живить шкіру
Вітаміни С та Е — чинять антиоксидантну дію, живлять

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Сяяння шкіри завдяки інтенсивному догляду
- Для природного сяяння



Сироватка проти
набряків навколо очей

для всіх типів шкіри

Гіалуронан — розгладжує та тонізує шкіру
Провітамін B5 (пантенол) — зволожує, чинить протизапальну дію
Алое вера — зволожує, освіжає

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Зволожує ніжну шкіру навколо очей
- Усуває набряки та темні кола

СИРОВАТКИ ТА ГЕЛІ



Сироватка для захисту від впливу синього світла

для всіх типів шкіри

Екстракт малахіту — захищає шкіру від впливу довкілля, чинить антиоксидантну дію
Ламінарія пальчаста — захищає шкіру від впливу чинників довкілля
Женьшень — чинить антиоксидантну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Захищає шкіру від впливу синього світла



Сироватка для розгладження шкіри

для всіх типів шкіри

Колаген — підвищує еластичність шкіри
Кофеїн — живить шкіру, чинить детоксикаційний ефект
Олія помело — живить шкіру, чинить антибактеріальну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Зміцнює сполучну тканину
- Формула зміцнення шкіри

НАЙКРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ З



Sonic Facial
Roller | 4 in 1



Sonic Facial &
Body Roller | 4 in 1

СИРОВАТКИ ТА ГЕЛІ



Зволожувальний гель
MicroCurrent

для всіх типів шкіри


НАЙКРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ З



MicroCurrent
Face-Lift Pen | 6 in 1



MicroCurrent
Face-Lifter | 6 in 1

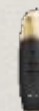

MicroCurrent Skin Scrubber &
Blackhead Remover | 9 in 1

Колаген — підвищує еластичність шкіри
Гіалуронан — розгладжує та тонізує шкіру
Гліцерин — зволожує шкіру

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Зволожує та заспокоює шкіру

ДЕННІ КРЕМИ



Денний крем проти старіння

для нормальної та зневодненої шкіри

Колаген — поліпшує еластичність шкіри
Гіалуронан — розгладжує, тонізує шкіру
Екстракт листя рамбутану — зволожує, згладжує шкіру

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Для шкіри, що дихає молодістю
- SPF 20



Зволожувальний денний крем

для всіх типів шкіри

Мигдалева олія — живлення, зволоження
Провітамін B5 (пантенол) — зволожує, чинить протизапальну дію
Екстракт айви — чинить антиоксидантну дію
Олія жожоба — заспокоює шкіру

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- 24-годинне зволоження та тривале сяяння
- Від блідості до сяяння шкіри



Денний крем із захистом від УФ-випромінювання

для нормальної та зневодненої шкіри

Q10 — зволожує, розгладжує шкіру
Колагеновий комплекс — поліпшує еластичність шкіри
Гіалуронан — розгладжує, тонізує шкіру

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Чинить антиоксидантну дію, сприяючи оздоровленню клітин
- Зменшує зморшки, спричинені сухістю

НІЧНІ КРЕМИ



Нічний крем проти старіння

для нормальної та зневодненої шкіри

Колаген — поліпшує еластичність шкіри
Гіалуронан — розгладжує, тонізує шкіру
Екстракт листя рамбутану — зволожує, згладжує шкіру

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Для шкіри, що дихає молодістю



Відновлювальний нічний крем

для нормальної та зневодненої шкіри

Q10 — зволожує, розгладжує шкіру
Колагеновий комплекс — поліпшує еластичність шкіри
Арганова олія — зволожує, чинить антибактеріальну дію

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Для гладенької та пружної шкіри

